



HERITAGE
MEDICAL

urzadzenia-medyczne.com.pl

MEDYCZNE WAGI KOLUMNOWE

Dokładne pomiary • Solidne i trwałe wykonanie

Wagi kolumnowe seca wyróżniają się nie tylko najwyższą precyzją, ale także swoimi właściwościami, które upraszczają codzienną pracę służby zdrowia: rutynowe czynności zostają skrócone, proces mierzenia i ważenia przyspieszony, natomiast wyniki pomiarów wybranych produktów bezprzewodowo przesłane bezpośrednio na PC lub drukarkę. W ten sposób seca działa na korzyść lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu. Do tego dochodzą na pierwszy rzut oka drogoplanowe szczegóły, jakimi są intuicyjna obsługa i łatwe do utrzymania w czystości platformy.

wagi lekarskie

bezpieczne, solidnie wykonane idealnie sprawdzą się w gabinecie lekarskim


Kontakt z nami:
+48 12 263 73 27
+48 793 930 812
biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl




► Od ponad 176 lat świata medycyny nie można wyobrazić sobie bez wag seca. Dzięki wysokiej precyzji, solidnej mechanice, trwałej elektronice i wielu przemyślanych detalach waga seca jest wagą seca. Nie wspominając o bezkonkurencyjnie niewielkiemu zużyciu energii lub rolkom, które ułatwiają transport z pomieszczenia do pomieszczenia.

seca 704 | medyczna waga z legalizacją

Waga kolumnowa do 300 kg z funkcją przesłanie wyników do EDM 

Od małych dzieci do pacjentów z otyłością – seca 704 jest prawdziwą wagą wszechmogącą, zwłaszcza gdy chodzi o takie wartości jak masa ciała, BMI i wzrost. Tutaj mamy dwie możliwości: montaż mechanicznego wzrostomierza na wadze lub bezprzewodowy odbiór wzrostu z opcjonalnego stadiometra seca 274 lub seca 264. Dalszymi zaletami są wyjątkowo duża nośność do aż 300 kg, która pozwala na ważenie bardzo otyłych pacjentów, obszerna i jednocześnie płaska platforma oraz oszczędzające czas funkcje Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD i matka/dziecko. Wszystko to gotowe na przyszłą integrację z EDM.

- Nośność: 300 kg
- Podziałka: 50 g < 150 kg > 100 g
- Funkcje: TARA, Pre-TARA, funkcja matka/dziecko, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, automatyczna zmiana zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja, automatyczne wyłączenie, SEND/PRINT
- Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456, wzrostomierz seca 220 lub seca 224, zasilacz seca 447

 **Kompatybilna ze** wszystkimi systemami EDM i produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

EMR
Integration



Podstawa wykonana z ciężkiego żeliwa znieśnie nawet intensywne obciążenie.



Opcjonalny wzrostomierz umożliwia jednoczesny pomiar wagi i wzrostu.



Praktyczne kółka umożliwiają transport wagi. Kabel elektryczny schowany w kolumnie wagi aby nie uszkodzić przewodu.



Dzięki modułowi interfejsu seca 452, seca 704 może przesyłać każdy pomiar do opcjonalnej drukarki bezprzewodowej seca lub bezpośrednio do systemu EDM.

Mierzenie i ważenie w jednym kroku – dzięki wintegrowanym wzrostomierzu.



EMR Integration

seca 704 s | medyczna waga z legalizacją

Waga kolumnowa z funkcją przesyłanie wyników do EDM i wzrostomierzem 6–230 cm

Mierzenie i ważenie w jednym kroku – do tego opracowaliśmy wagę kolumnową seca 704 s z bezprzewodową transmisją danych. Dokładne mierzenie pacjenta umożliwia zintegrowany wzrostomierz z zakresem podziału do 230 cm. Od obu wartości – wagi i wzrostu, seca 704 s automatycznie oblicza również BMI. Wyniki można przesyłać bezprzewodowo bez opóźnienia do drukarki lub systemu EDM. Inteligentne rozwiązania ułatwiają działanie: wyświetlacz można obsługiwać, gdy pacjent jest nadal stoi na wadze a odczyt ze wzrostomierza ułatwia dwustronny wydruk. Funkcja TARA to oszczędność czasu w pediatrii, znana również jako funkcja matka / dziecko. Dziecko może być ważone bez zakłóceń na ramieniu matki. Wcześniej zapisana masa ciała matki jest tarowana, więc uzyskujemy tylko ciężar dziecka. Dzięki ogranicznikowi pięć możliwe są pomiary za pomocą systemu 3-punktowego.

Waga:

- Nośność: 300 kg
- Podziałka: 50 g < 150 kg > 100 g
- Funkcje: TARA, Pre-TARA, funkcja matka/dziecko, HOLD, Auto-HOLD, BMI, zakres funkcji Auto-CLEAR, automatyczne ważenie, regulowane tłumienie, automatyczne wyłączenie, SEND/PRINT
- Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456, pozycjoner głowy seca 430, zasilacz seca 447

Wzrostomierz:

- Zakres pomiaru: 6–230 cm
- Podziałka: 1 mm

Kompatybilna ze wszystkimi systemami EDM i produktami seca gotowymi do pracy z EDM.



Oznakowanie boczne wzrostomierza umożliwia optymalny odczyt wzrostu.



Praktyczne kółka umożliwiają transport wagi. Kabel elektryczny schowany w kolumnie wagi aby nie uszkodzić przewodu.

Kontakt z nami:
+48 12 263 73 27
+48 793 930 812
biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

HERITAGE
MEDICAL

seca 799 | medyczna waga z legalizacją


Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem i funkcją BMI

Uniwersalna, niewymagająca częstej konserwacji i niezależna od miejsca użytkowania, z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym – seca 799 jest idealna do codziennego użytku w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dzięki rolkom transportowym waga ta jest mobilna. seca 799 wyposażona jest w kilka funkcji inteligentnych. Na przykład, funkcja BMI pozwala na wiarygodną ocenę stanu odżywienia pacjenta. Waga wyposażona we wzrostomierz umożliwia jednoczesny pomiar wzrostu i wagi, oszczędzając tym samym czas.

- Nośność: 200 kg
- Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g
- Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączenie, wzrostomierz o zakresie pomiaru 75–200 cm i podziałce 1 mm
- Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220 lub seca 224, zasilacz seca 447



Aby obliczyć BMI, wystarczy nacisnąć przycisk.

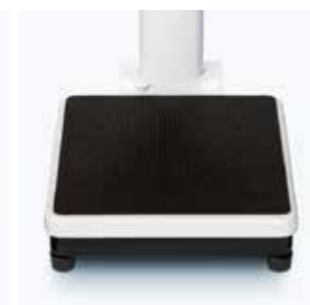

Antypoślizgowa powierzchnia platformy gwarantuje bezpieczeństwo. Kółka transportowe do łatwego przemieszczania wagi, Kabel elektryczny schowany w kolumnie wagi aby nie uszkodzić przewodu.

DOBRY
WYBOR


Waga ciesząca się największą popularnością!

sprawdza się świetnie w szkolnych gabinetach pielęgniarstwa czy oddziałach szpitalnych niezależnie od ilości wykonywanych dziennie ważeń

idealny stosunek jakości do ceny

medyczna waga z legalizacją

seca 711

Mechaniczna waga kolumnowa z przesuwными odważnikami na wysokości wzroku 

Precyzyjna, solidna i wygodna: seca 711 z obciążeniem maksymalnym do 220 kg nadaje się do ważenia nawet mocno otyłych osób. Dodatkowy komfort użytkowania zapewniają płaska, duża i niewysoko osadzona platforma oraz wskaźnik umieszczony na wysokości wzroku. Dwustronna skala daje się odczytać zarówno przez personel medyczny, jak i pacjenta. Budowa z wysokiej jakości materiałów (żeliwna podstawa, stalowa kolumna) gwarantują wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu oraz długowieczność. Waga może zostać wyposażona w opcjonalny wzrostomierz seca 220 do jednoczesnego dokonywania pomiaru wagi i wzrostu.

- Nośność: 220 kg
- Podziałka: 100 g
- Funkcje: ustawienie punktu zerowego
- Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220



Wartości znajdują się po obu stronach wygodnie umieszczonej na wysokości oczu skali.

Szeroka i płaska budowa platformy ułatwia wejście na wagę i stabilną pozycję w czasie ważenia.



Akcesoria

seca 220

Wzrostomierz teleskopowy do wag kolumnowych seca

Ten wysuwany wzrostomierz można zamontować do wielu wag kolumnowych seca.

- Zakres pomiaru: 60–200 cm
- Podziałka: 1 mm
- Optional: pozycjoner głowy seca 430



Z wyraźnie widocznym, czerwonym oknem odczytu łatwo sprawdzić wzrost.

Kontakt z nami:
+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

3 istotne zalety wag seca

- 1 dopracowane w każdym szczególe
- 2 bardzo solidna, żeliwna platforma, która wytrzyma intensywną pracę przez długie lata
- 3 wygodne rolki, dzięki którym z łatwością można przemieścić wagę w potrzebne miejsce



wszystkie produkty seca objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta

seca

deklaracja zgodności



Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami poniższych dyrektyw.

Kategoria	Nieautomatyczne elektroniczne wagi kolumnowe
Produkt	704
Numer certyfikatu badania typu UE	D05-09-016
Klasa dokładności	III
Procedura oceny zgodności dla wag nieautomatycznych	Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102), dokonała oceny zgodności zgodnie z modułem D dyrektywy 2014/31/UE i wydała następujący certyfikat: DE-M-AQ-PTB123
Klasyfikacja jako wyrób medyczny	Klasa I z funkcją pomiarową
Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych	Godnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych
Opcjonalnie z bezprzewodową transmisją danych	x

Dyrektywy:

2014/31/UE	Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
93/42/EWG	Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych
2011/65/UE	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W przypadku wyrobów z funkcją bezprzewodowej transmisji danych obowiązują dodatkowo następujące przepisy:

Dyrektywa:

1999/5/WE	Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności
------------------	---

Producent: seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Niemcy

Made in China
Designed in Germany

Jednostki notyfikowane:	2014/31/UE: Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee 100 38116 Braunschweig, Niemcy Identyfikator: 0102	93/42/EWG: TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse 65 80339 München, Niemcy Identyfikator: 0123
--------------------------------	--	--



Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Hamburg, 20.04.2016

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing

deklaracja zgodności



Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami poniższych dyrektyw.

Kategoria	Nieautomatyczne elektroniczne wagi osobowe				
Produkty	799	875	877	878	899
Numer certyfikatu badania typu UE	D07-09-032				
Klasa dokładności	III / IIII	III	III / IIII		
Procedura oceny zgodności dla wag nieautomatycznych	Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102), dokonała oceny zgodności zgodnie z modułem D dyrektywy 2014/31/UE i wydała następujący certyfikat: DE-M-AQ-PTB123				
Klasyfikacja jako wyrób medyczny	Klasa I z funkcją pomiarową				
Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych	Godnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych				

Dyrektywy:

2014/31/UE	Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
93/42/EWG	Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych
2011/65/UE	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Producent: seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Niemcy

Made in China
Designed in Germany

Jednostki notyfikowane:	2014/31/UE: Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee 100 38116 Braunschweig, Niemcy Identyfikator: 0102	93/42/EWG: TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse 65 80339 München, Niemcy Identyfikator: 0123
--------------------------------	--	--



Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Hamburg, 20.04.2016

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing



Zapraszamy na naszą stronę urzadzenia-medyczne.com.pl, gdzie mogą Państwo wygodnie zamówić wszystkie wagi oraz dokonać bezpiecznej płatności on-line. W przypadku placówek medycznych istnieje możliwość uzgodnienia odroczonego terminu płatności - w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny przed zakupem.

Terminy dostaw: wszystkie terminy dostawy wag i urządzeń można sprawdzić zapisując wybrany produkt do koszyka. W przypadku wag z legalizacją, termin dostawy kształtuje się od 7 dni roboczych od ok. 3 tygodni w zależności od rodzaju urządzenia.

Na wszystkie urządzenia seca obowiązuje 24 miesięczna gwarancja producenta. Wszystkie urządzenia marki seca posiadają deklarację zgodności CE. Wszystkie produkty marki seca posiadają drukowaną polską instrukcję obsługi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ważna informacja dotycząca wag z legalizacją

W przypadku zakupu legalizowanej wagi seca należy pamiętać o:

1. zabezpieczeniu deklaracji zgodności zawartej w instrukcji urządzenia, gdyż wraz z naklejkami znajdującymi się na wadze (CE, znak M, tabliczka znamionowa oraz cechy zabezpieczające) są dowodem że waga pomyślnie przeszła proces oceny zgodności i może zostać użyta do celów medycznych,
2. dbaniu o cechy zabezpieczające by nie uległy zniszczeniu lub zatarciu. Uszkodzenie cechy/tabliczki wiąże się automatycznie z utratą legalizacji,
3. **legalizowaną wagę medyczną należy poddać kolejnej legalizacji ponownej:**
 - po raz pierwszy: po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku w którym została zakupiona
 - po raz kolejny: co 25 miesięcy
4. Legalizacji ponownej wagi można dokonać w własnym zakresie w Obwodowym Urzędzie Miar na danym terenie lub przez naszą firmę.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27, +48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl